

RT

Dialog.

SCRAPER



- ✂ Эффективное удаление
- 🔄 Сменные насадки
- 🏠 Высококачественные материалы
- ✅ Надежность и безопасность



Преимущества

Высокая эффективность удаления

Насадки разной формы точно и глубоко проникают в корневой канал, вычищая остатки гуттаперчи и других материалов, а также остатки пульпы, в том числе, из апикальной трети канала.

Сменные рабочие насадки

Рабочие насадки подбираются исходя из клинической ситуации, с учетом диаметра корневого канала и степени его заполнения гуттаперчей.

Высококачественные материалы

Отличная устойчивость к коррозии, антибактериальные свойства, высокая прочность. Все это обеспечивает стабильную работу и отсутствие деформации при многократном использовании, многократной очистке и дезинфекции.


Высокая безопасность

Отсутствие опасности повреждения канала при очистке корневых каналов зубов. Нет необходимости в постоянном изменении угла наклона инструмента.



Информация

Форма наконечника	Модель	Диаметр	Длина
 Двойной конус (360°)	0.5S	0.50mm	21mm
 Одинарный конус (360°)	0.3S	0.34mm	21mm
 Одинарный полуконус (180°)	0.3S-CL	0.34mm	21mm
	0.3S-CR	0.34mm	21mm
	0.3L-CL	0.34mm	28mm
	0.3L-CR	0.34mm	28mm

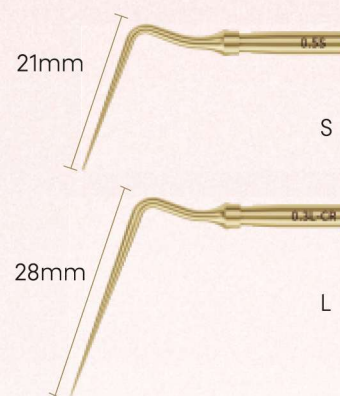

Применение

0.3S	0.5S	0.3S-CR/0.3S-CL	0.3L-CR/0.3L-CL
			
Узкие корневые каналы	Широкие корневые каналы	Узкие и сильно изогнутые корневые каналы, участки неправильной формы вблизи стенок канала.	Длинные и узкие корневые каналы, с участками неправильной формы вблизи стенок канала.
Удаление гуттаперчи из корневого канала, удаление остатков некротизированной пульпы, мусора и посторонних материалов.		Удаление гуттаперчи из корневого канала, удаление остатков некротизированной пульпы, остатков дентина, мусора и других посторонних материалов в труднодоступных местах корневого канала.	