

Лёгкость препарирования

Комплект эндо-файлов
Eighteeth E-Style Gold/Blue




E-Style Gold – набор для формирования ковровой дорожки

Закалённый до золотого цвета NiTi-сплав



- VT (variable taper) – файлы с непостоянной конусностью.
- Максимально безопасен для препарирования и подготовки канала.
- Гнущиеся файлы входят точно в канал зуба.
- Можно использовать как в простых, так и сложных клинических случаях.
- Высокая эффективность при обхождении ступеньки.

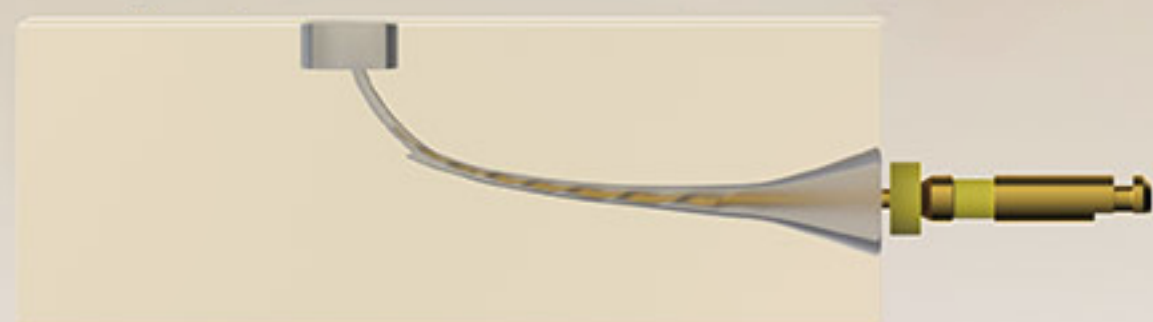


препарирование канала с использованием файла 04vt/17

Безопасные и простые в использовании

- Широкий ассортимент эндодонтических файлов позволяет выбрать наиболее подходящий инструмент для каждого этапа лечения
- Конструкция файлов с основанием длиной 6 мм позволяют доктору понять, что необходимо остановиться
- Сохраняют прецервикальный дентин при работе
- Меньший риск эффекта закручивания
- Предотвращают оверинструментацию, перерасширение канала в устьевой части и ятрогенное повреждение

расширитель устья

13/25

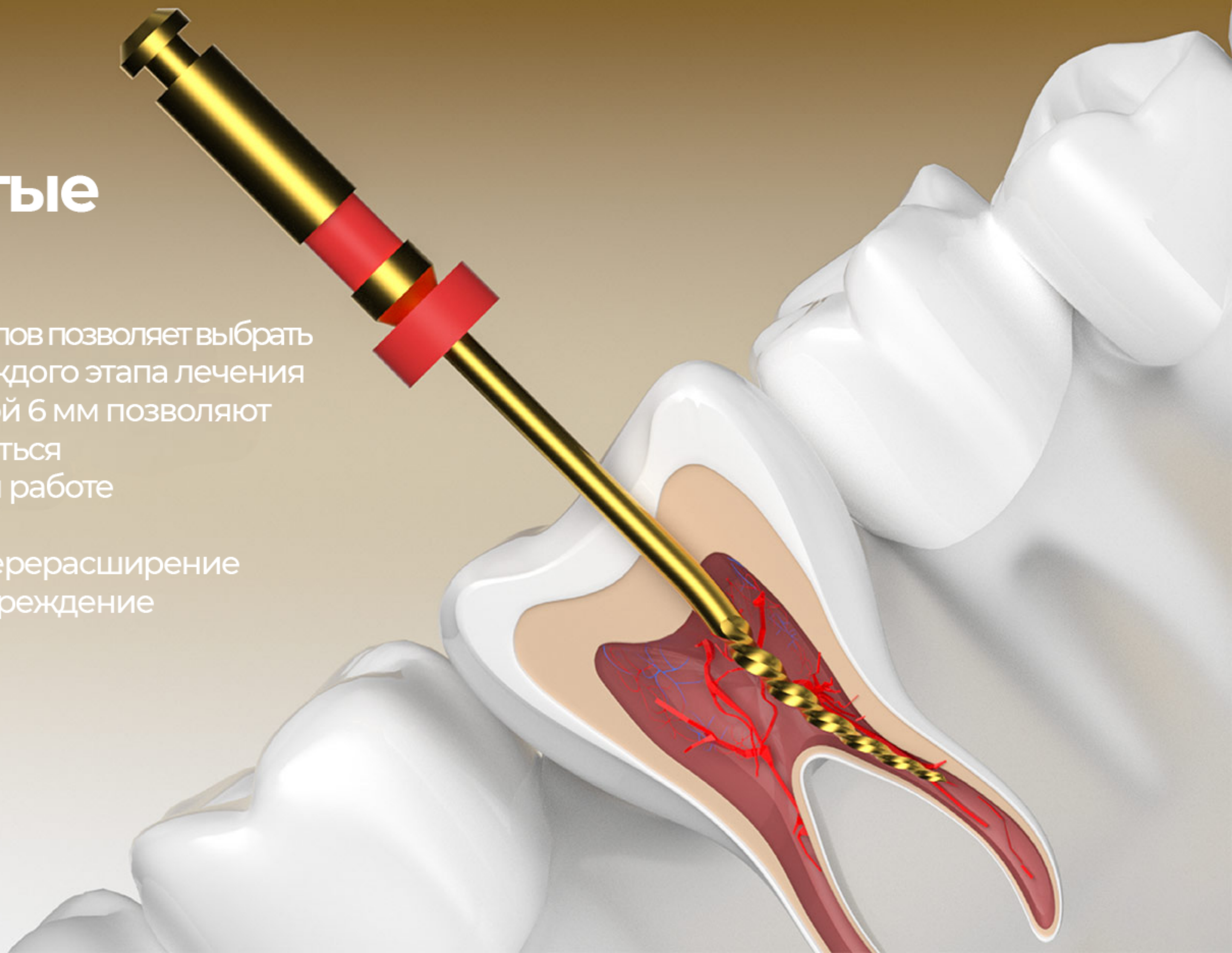

Файлы для формирования канала

Файл 03/12,5

- Короткий наконечник и форма сечения в виде буквы S улучшают проходимость в узкие пространства.

Файл 04vt/17

- Эвакуирует стружку из канала, облегчая дальнейшее препарирование канала.
- Файл с переменной конусностью удобен для работы в сложных корневых каналах.
- VT минимизирует риск поломки инструмента.
- Минимизирует воздействие на дентин.


Файл 05/25

- Сохраняет дентин при глубоком очищении канала и подготовке его к obturации.

Файл 04vt/17




Файлы E-style Blue – дополнительный набор для сложных случаев оформления канала

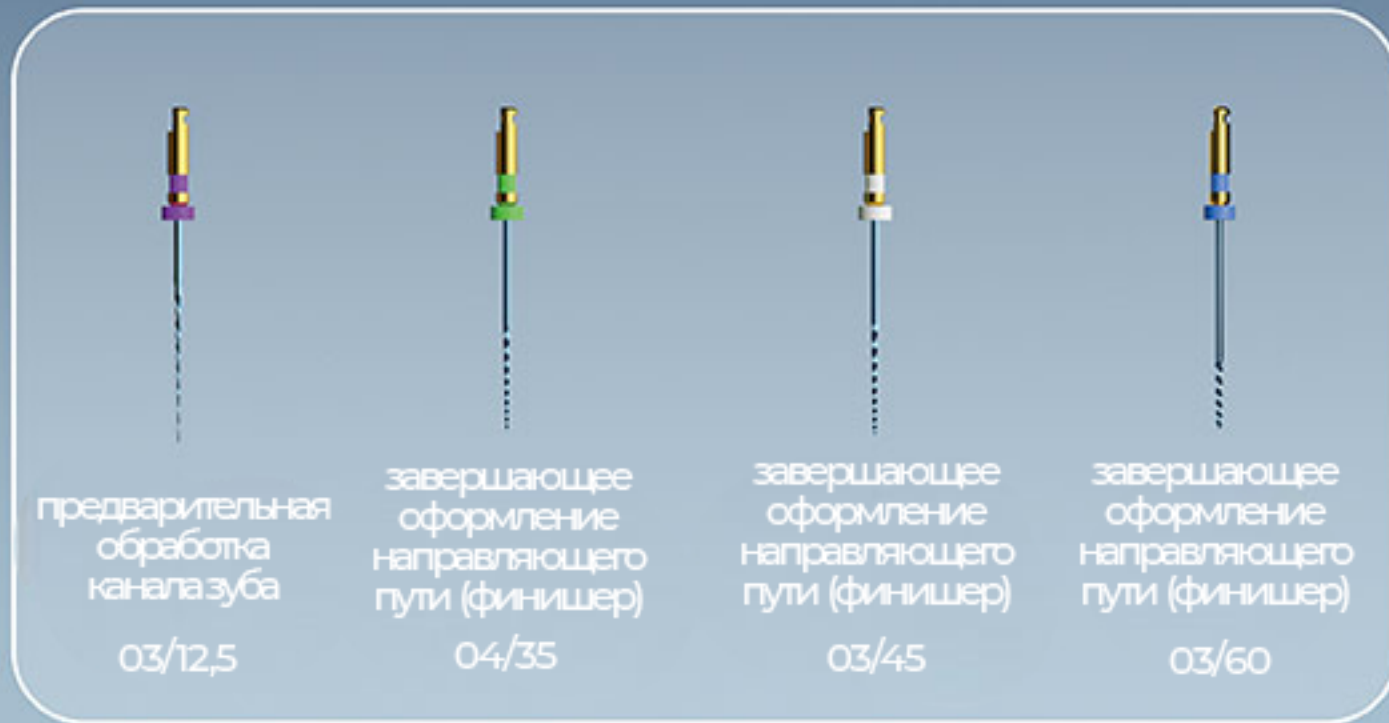


- Голубой NiTi-сплав файлов означает меньшую закалку по сравнению с золотыми файлами. Этот материал лучше гнётся, поэтому подойдёт для сложных случаев, где необходим минимально инвазивный подход, например, в изогнутых каналах.
- Имеют большую конусность и могут удалить и эвакуировать большее количество опилок; идеально подходят для подготовки моляров и лёгкого предварительного изгиба.
- Имеют увеличенный диаметр наконечника, поэтому идеальны для финального этапа подготовки канала
- Подходят для работы с различной глубиной корневых каналов
- Можно предварительно согнуть для удобства

Протокол лечения обычных и сложных случаев заболеваний корневых каналов

Большинство кейсов

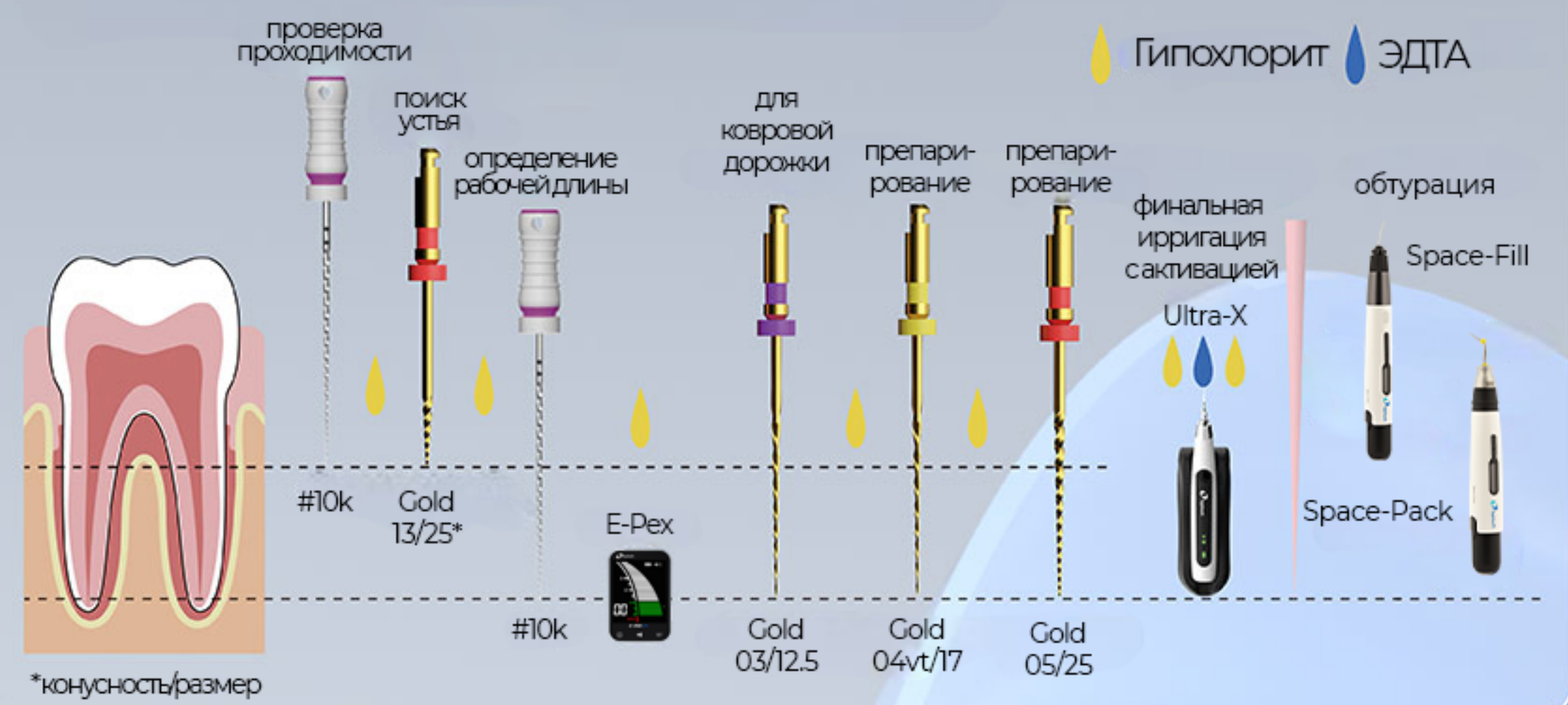

Сложные кейсы

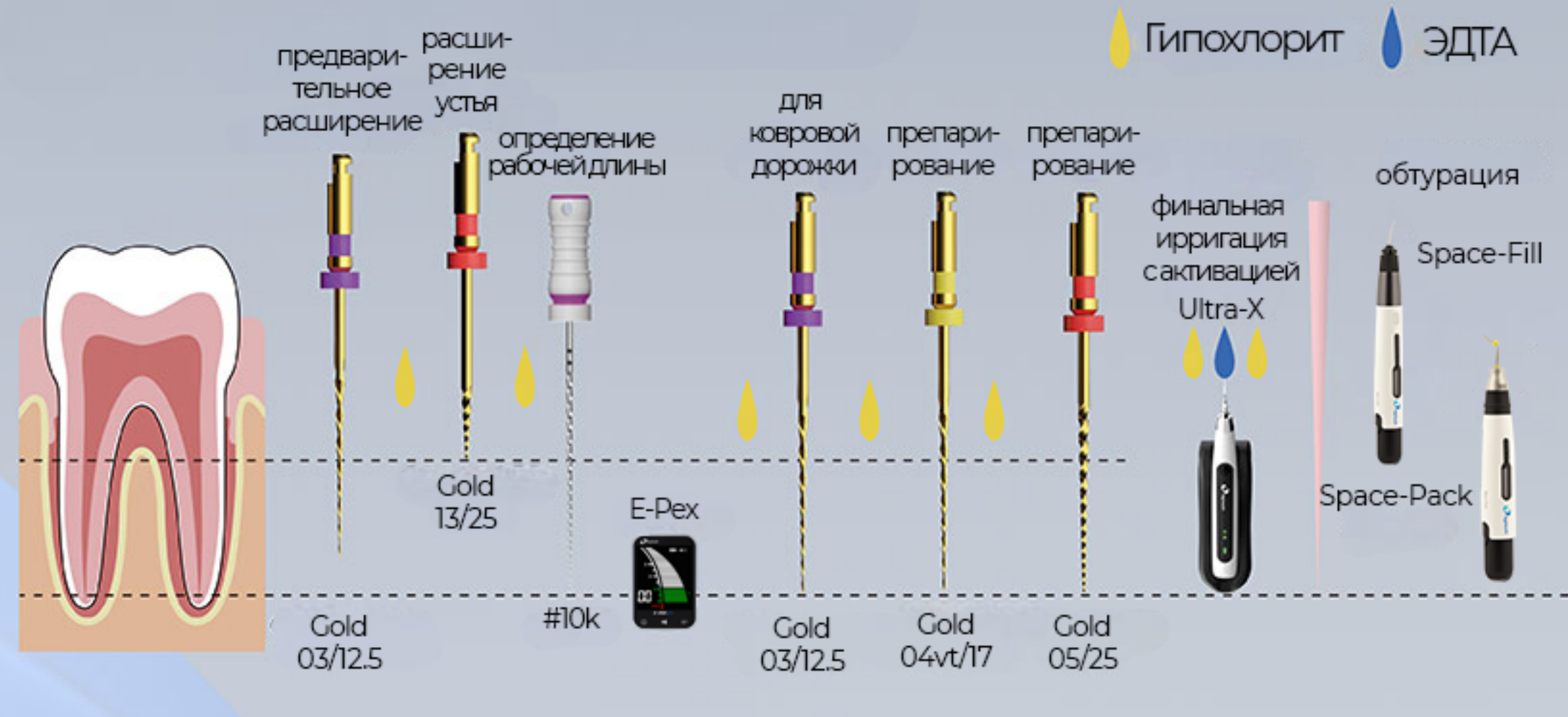




E-STYLE GOLD
Shaping Kit
Enjoy Your Easy Shaping



E-STYLE BLUE
Accessory Kit
Enjoy Your Easy Shaping

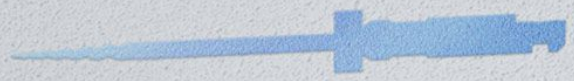

E-STYLE GOLD
Shaping Kit
Enjoy Your Easy Shaping



E-STYLE GOLD
Shaping Kit
Enjoy Your Easy Shaping



E-STYLE GOLD
Shaping Kit
Enjoy Your Easy Shaping

